



# Nakkestøtte/ Nakkestøtte/ Nackstöd/ Head support - VELA Tango

Montering af nakkestøtte CY, ES5, T3 rygge

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:



(A)410305xxx

(A)410305xxx

(A)410301xxx

(A)413101xxx

(A)413103xxx

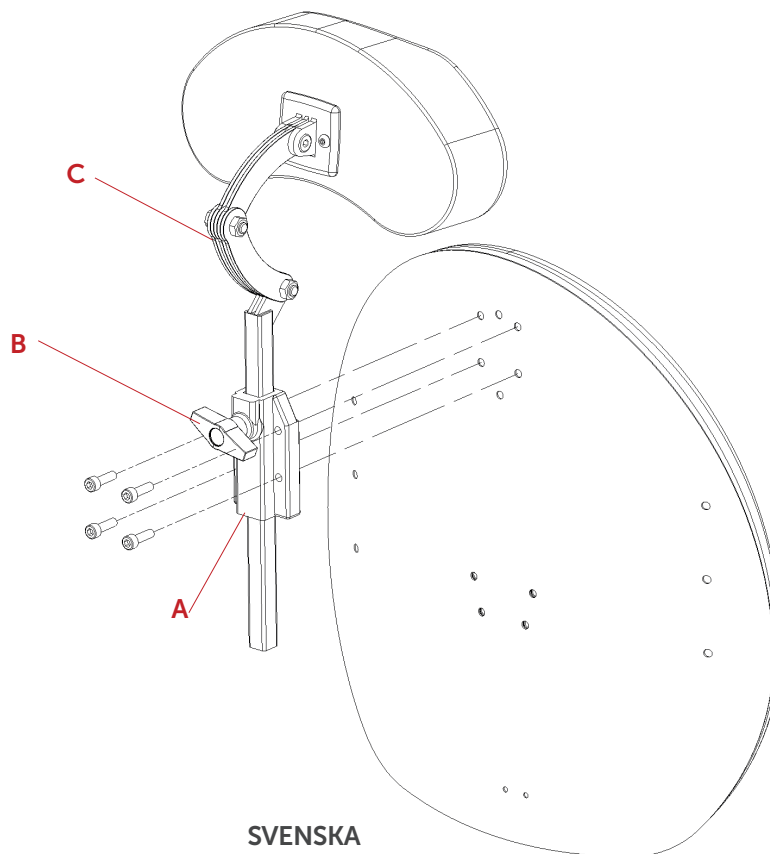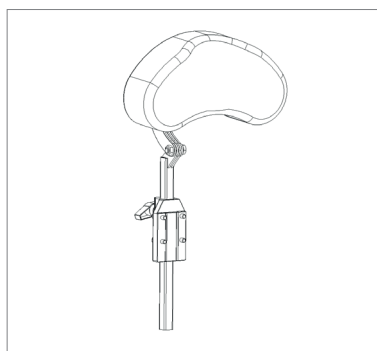

## DANSK

1. Placer nakkestøtteholderen (A) på ryglænet over de 4 skruehuller. Hvis hullerne i stoffet ikke kan ses, føl dig frem til hullerne, brug evt. en spids genstand til at stikke hullerne ud i stoffet.
2. Påsæt de 4 skruer og spænd godt efter. Sæt nakkestøtten i nakkestøtteholderen.
3. Løsn vingskruen (B) for at ændre nakkestøttens højde.
4. Løsn leddene på nakkestøtten med en skruenøgle (C), for at indstille vinklen/dybden. Spænd skruen godt bagefter.

## NORSK

1. Plasser nakkestøtteholderen (A) på ryggstøtten over de 4 skruehullene. Hvis hullene i stoffet ikke er synlige, føler du deg frem til hullene. Bruk eventuelt en spiss genstand til å stikke ut hullene i stoffet.
2. Sett på de 4 skruene og stram deretter godt. Sett nakkestøtten i nakkestøtteholderen.
3. Løsne vingskruen (B) for å endre nakkestøttens høyde.
4. Løsne leddene på nakkestøtten med en skrunøkkel (C) for å justere vinkelen/dybden. Stram deretter skruen godt.

## SVENSKA

1. Placera nackstödshållaren (A) på ryggstödet över de fyra skruvhålen. Om tyget döljer hålen, känn dig fram för att hitta dem. Använd eventuellt ett spetsigt föremål för att göra hål i tyget så att hålen blir åtkomliga.
2. Sätt dit de fyra skruvarna och dra åt ordentligt. Sätt nackstödet i nackstödshållaren.
3. Lossa vredet (B) för att ändra nackstödet höjd.
4. Lossa nackstödet leder med skruvnyckel (C) för att justera vinkel/djup. Dra åt skruven ordentligt efteråt.

## ENGLISH

1. Position the head support fixture (A) on the backrest over the 4 screw holes. If the holes in the fabric are not visible, try to find them by feeling for them. If necessary, use a sharp object to make holes in the fabric.
2. Insert the 4 screws and tighten them. Insert the head support into the head support fixture.
3. Loosen the wing screw (B) to adjust the height of the head support.
4. Use a spanner (C) to loosen the joints of the head support in order to adjust the angle/depth. Then, tighten the screw once again.