




Fodudløser sædehøjde/ Fotutløser for setehøjde/ Fotreglage för sitshöjd/ Foot release seat height - VELA Samba

Montering af fodudløser VELA Samba

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)926645 Fodudløsserring inkl. 200mm gas, sædehøjde 44-64 cm

(A)926646 Fodudløsserring inkl. 260mm gas, sædehøjde 55-81 cm

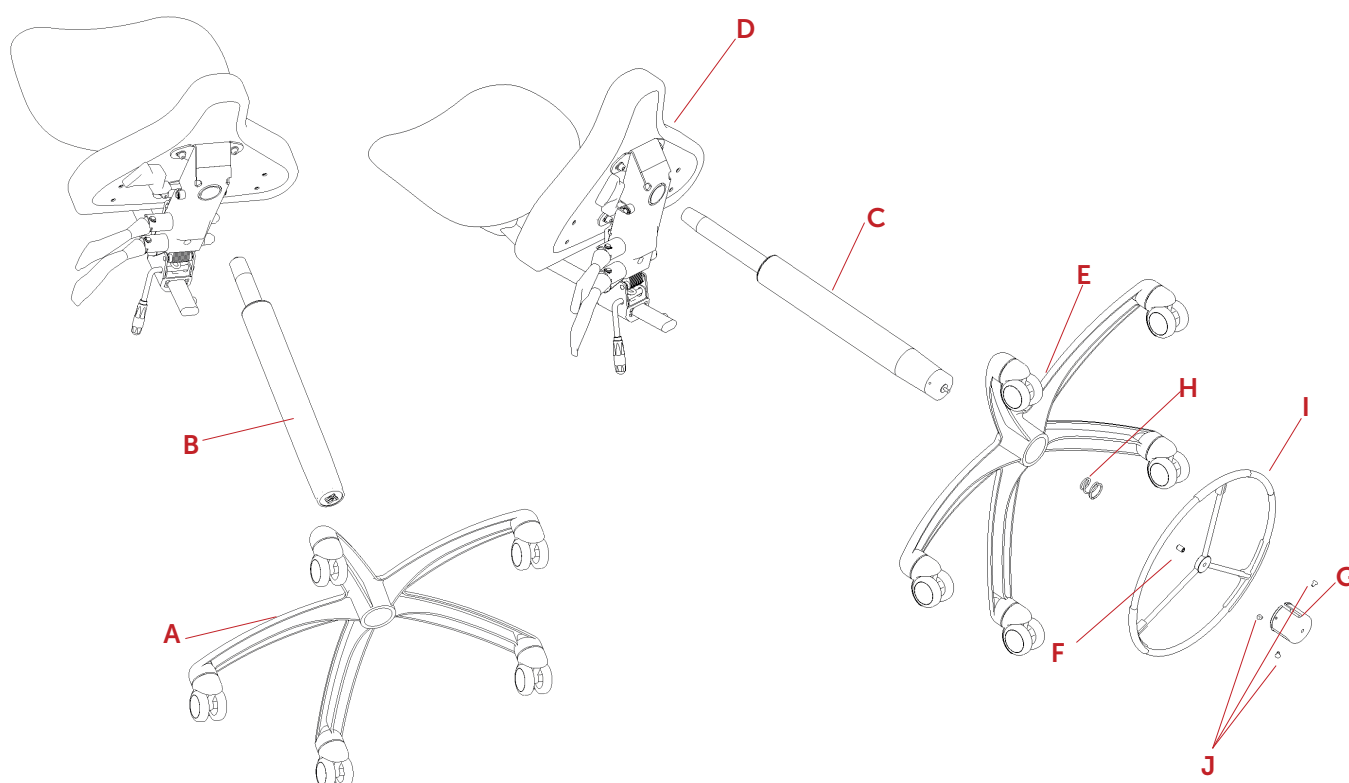

DANSK

1. Afmonter understel (A) og gaspatron (B) med gummihammer.
2. Monter den nye gaspatron (C) i overparten (D) og slå den forsigtigt fast med gummihammer.
3. Sæt understel (E) på gaspatronen (C).
4. Før pinolskruen (F) kan indstilles skal man give den Loctite, for at "låse" den fast.
5. Læg fjeder (H) ovenpå fodudløsserring (I) nede i plastikkoppen (G), med den smalle del af fjederen opad.
6. Skru fodudløser med kop fast på gaspatronen med de tre skruer (J).
7. Brug en unbraconøgle til at justere pinolskruen (F) i midten af fodudløsserringen. Pinolskruen skal kunne nå op og udløse gaspatronen, når man træder på ringen.



Fodudløser sædehøjde/ Fotutløser for setehøjde/ Fotreglage för sitshöjd/ Foot release seat height - VELA Samba

VELA Samba

NORSK

1. Demonter understellet (A) og gasspatronen (B) med en gummihammer.
2. Monter den nye gasspatronen (C) i overdelen (D), og slå den forsiktig fast med en gummihammer.
3. Sett understellet (E) på gasspatronen (C).
4. Lås fast pinolskruen (F) med litt Loctite før den er justert.
5. Legg fjæren (H) på fotutløseringen (I) nede i plastkoppen (G) med den smale delen av fjæren opp.
6. Skru fotutløseren med koppen fast på gasspatronen med de tre skruene (J).
7. Bruk en unbrakonøkkel til å justere pinolskruen (F) midt på fotutløseringen. Pinolskruen skal kunne nå opp og løse ut gasspatronen når man trækker på ringen.

SVENSKA

1. Demontera underredet (A) och gaspatronen (B) med gummihammare.
2. Montera den nya gaspatronen (C) i ovdelen (D) och knacka den försiktigt på plats med gummihammare.
3. Sätt underredet (A) på gaspatronen (C).
4. Innan sättskruven (F) är inställd ska Loctite låsvätska appliceras för att låsa fast den.
5. Lägg fjädern (H) ovanpå fotringen (I) nere i plastkåpan (G). Den smala delen av fjädern ska vara vänd uppåt.
6. Skruva fast fotreglaget med kåpa på gaspatronen med de tre skruvarna (J).
7. Använd insexnyckel för att justera sättskruven (F) i mitten av fotringen. Sättskruven ska kunna nå upp för att aktivera gaspatronen när man trampar på ringen.

ENGLISH

1. Use a rubber mallet to remove the underframe (A) and gas cartridge (B).
2. Insert the new gas cartridge (C) in the top piece (D) and gently hit it into place with the rubber mallet.
3. Set the underframe (E) on the gas cartridge (C).
4. Before the pivot screw (F) is set, apply Loctite to it to hold it in place.
5. Lay the spring (H) over the foot release ring (I) down into the plastic casing, with the narrow section of the spring facing upward.
6. Use the three screws (J) to screw the foot release with casing in place on the gas cartridge.
7. Use an Allen key to adjust the pivot screw (F) in the middle of the foot release ring. The pivot screw must be able to reach up and activate the gas cartridge when the ring is stepped on.