



Udskiftning af gaspatron/ Skifte gasspatron/ Byte av gaskolv/ Replacing the gas cartridge - VELA Samba


Udskiftning af gaspatron med yderrør VELA Samba

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)091030150 Gasfjeder m/chrom yderrør, sæde højde 39-54 cm


(A)091030200 Gasfjeder m/chrom yderrør, sæde højde 44-64 cm

(A)091030260 Gasfjeder m/chrom yderrør, sæde højde 60-86 cm

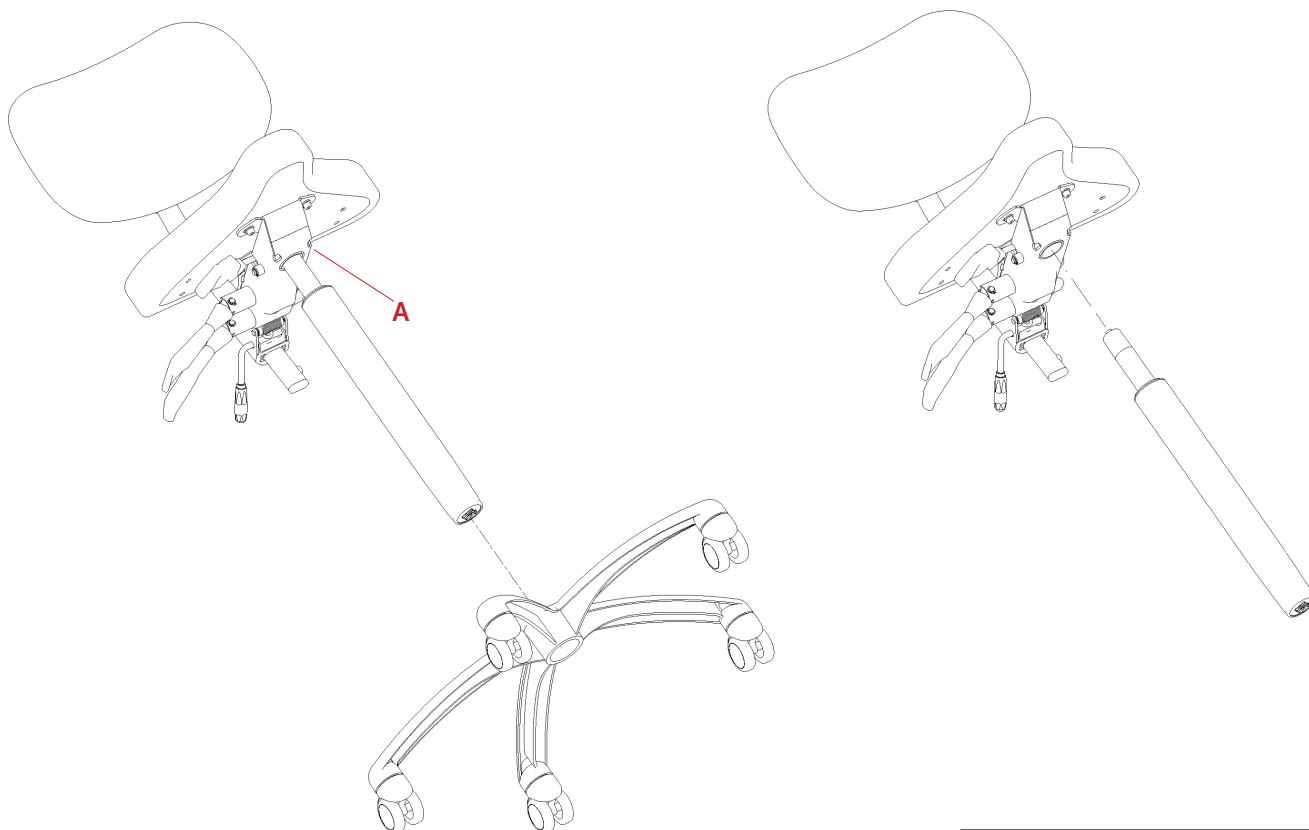

DANSK

1. Slå understellet af med en gummihammer. Bank så tæt på yderrør som muligt (A).
2. Hold om gaspatronen og slå på bærepladen, der hvor gaspatronen sidder fast, med gummihammer, indtil gaspatronen går ud af bærepladen.
3. Sæt den nye gas op i bærepladen.
4. Sæt understellet på igen.
5. Sæt et knæ i sædet og brug din kropsvægt til at presse overdelen godt på plads.
6. Tjek at gaspatronen kan udløse.

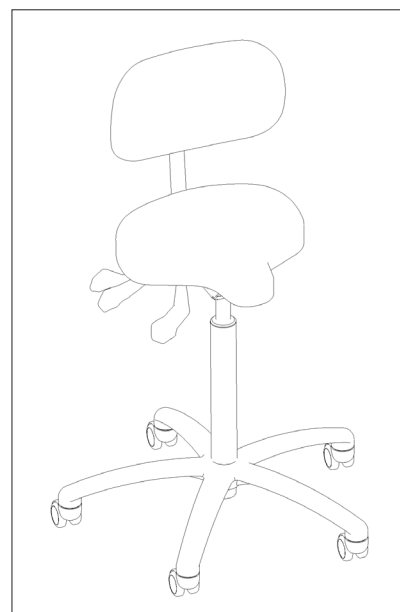



Udskiftning af gaspatron/ Skifte gasspatron/ Byte av gaskolv/ Replacing the gas cartridge - VELA Samba

VELA Samba

NORSK

1. Slå av understellet med en gummihammer. Bank så tett på det ytre røret som mulig (A).
2. Hold rundt gasspatronen, og slå med en gummihammer på bæreplaten der gasspatronen er festet, til gasspatronen går ut av bæreplaten.
3. Sett den nye gassfjæren opp i bæreplaten.
4. Sett understellet på igjen.
5. Sett et kne i setet og bruk kroppsvekten til å presse overdelen godt på plass.
6. Kontroller at gasspatronen kan løses ut.

SVENSKA

1. Knacka loss underredet med gummihammare. Knacka så nära in på ytterrøret som möjligt (A).
2. Håll fast gaskolven och slå med gummihammaren på stödplattan där gaskolven sitter fast tills kolven lossnar från plattan.
3. Sätt den nya gaskolven i stödplattan.
4. Sätt tillbaka underredet.
5. Sätt ena knät mot sitsen och utnyttja kroppsvikten för att pressa ovandelen ordentligt på plats.
6. Kontrollera att gaskolven kan aktiveras.

ENGLISH

1. Remove the underframe by hitting it with a rubber mallet. Hit as closely to the external tube as possible (A).
2. Hold onto the gas cartridge and use a rubber mallet to hit the spot on the seat support where the gas cartridge is positioned, until the cartridge comes loose from the seat support.
3. Set up the new gas in the seat support.
4. Set the underframe in place again.
5. Place a knee on the seat and use your body weight to press the top piece fully into place.
6. Check the gas cartridge to ensure it can be activated.