




Udskiftning af armlæn/ Skifte armlene/ Byte av armstöd/ Replacing the armrest - VELA Tango

Montering af nedfældbar armlæn VELA Tango 100-serie

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)928116 Armlænsæt nedfældbar manuel betjening

(A)928117 Armlænsæt nedfældbar el betjening

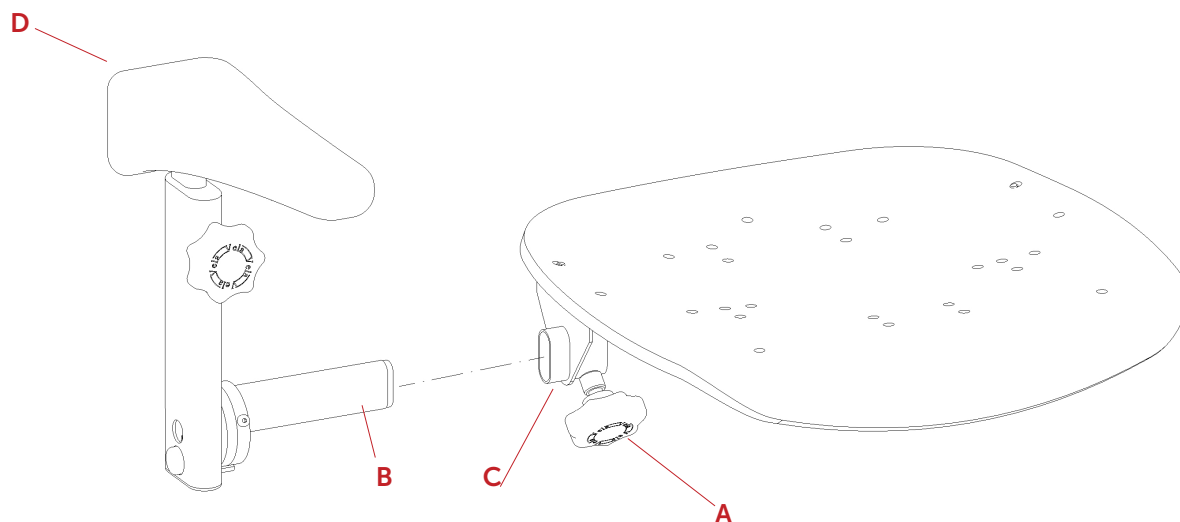

DANSK

1. Håndtag (A) under sæde løsnes. Afmonter armlæn. Knopfjeder (B) skal trykkes ind, for at kunne fjerne armlænet.
2. Sæt armlænet ind i armlænsbunden (C). Vær opmærksom på, at knopfjederen (B) skal trykkes ind, for at kunne sætte armlænet fast.
3. Placer armlænet og stram håndtaget igen.

OBS! Ved el-betjent armlæn, skal jack-stikket sættes ind bag på armlænet (D).

SVENSKA

1. Lossa handtaget (A) under sitsen. Demontera armstödet. Tryck in den fjädrande knappen (B) för att kunna lossa armstödet.
2. Placera armstödet i armstödsfästet (C). Tänk på att den fjädrande knappen (B) måste tryckas in för att det ska gå att sätta dit armstödet.
3. Sätt armstödet på plats och dra åt handtaget igen.
4. OBS! För elmanövrerade armstöd ska kontakten sättas i på baksidan av armstödet (D).

NORSK

1. Løsne håndtaket (A) under setet. Demonter armlænet. Fjærknappen (B) må trykkes inn for å fjerne armlænet.
2. Sett armlænet inn i armlænebunnen (C). Vær oppmerksom på at fjærknappen (B) må trykkes inn for å feste armlænet.
3. Plasser armlænet og stram håndtaket igjen.

OBS! Ved elektrisk betjent armlæne skal jackpluggen settes inn bak på armlænet (D).

ENGLISH

1. Loosen the handle (A) beneath the seat. Remove the armrest. The pop-out spring (B) must be pushed in to remove the armrest.
2. Set the armrest in the armrest fixture (C). Please note that the pop-out spring (B) must be pushed in to set the armrest firmly in place.
3. Position the armrest and tighten the handle once again.
4. NB: For an electric armrest, the jack plug must be inserted behind the armrest (D).