




VELA Hip Hop

VARIANT:

50/100

Manual nr. 105490

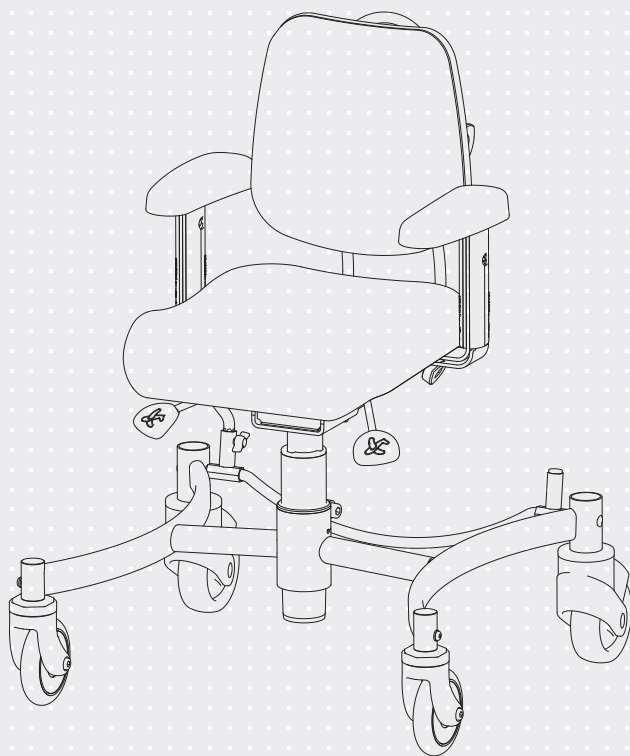

ISO 9001
ISO 14001

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEJLFINDING	5
1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN	6
1.4. SIKKERHED	7
1.4.1. Tiltænkt anvendelse	7
1.4.2. Transport	7
1.5. REKLAMATIONSRET	7
1.6. UDPAKNING AF STOLEN	8
1.7. VEDLIGEHOLDELSE	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Stel	8
1.7.3. Polsteroverflader	8
1.7.4. Genbrugshjælpemiddel	8
1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE	8
1.9. BRUGERMANUAL	9
1.9.1. Højdeindstilling	9
1.9.2. Indstilling af sædevinkel	9
1.9.3. Indstilling af ryghøjde og rygvinkel	9
1.9.4. Bremse	9
1.9.5. Indstilling af armlæn, højde	10
1.9.6. Indstilling af armlæn, bredde og dybde	10
1.9.7. Indstilling af sædedybde	10
1.9.8. Indstilling af sædekiler og skumbassin	10

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye VELA-stol. Vi er sikre på, at denne stol bliver til daglig glæde for dig. Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen. Brugermanualen kan også findes på www.vela.dk, hvor du også kan finde anden relevant information om vores stole.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela.dk

1.1. ADVARSLER





Brug	Ved allergisk reaktion, stop med at anvende stolen og konsulter egen læge
Brug	Brug kun originale VELA-reservedele
Brug	Lav ikke om på tilbehøret, der følger med stolen
Brug	Brug kun stolen til det tiltænkte formål
Brug	Indstil kun sædevinkelen, imens brugerens fødder er i kontakt med gulv
Brug	Stolen skal altid være bremsset, når man sætter sig ned eller rejser sig op fra den
Brug	Brug aldrig stolen på overflader med niveauforskelle, da der kan opstå risiko for, at stolen bliver ustabil
Brug	Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson
Brug	Service aldrig stolen, imens den bruges
Brug	Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning
Brug	Stolens funktioner er tiltænkt brugeren af stolen. Kun brugeren eller trænet fagpersonale bør indstille på stolen, imens brugeren sidder i den
Brug	Der kan opstå klemfare ved bevægelige dele. Brug derfor aldrig stolen, hvis brugeren eller andre holder fast under sædet og nedefter
Kvælningsfare	Kvælningsfare ved små dele. Lad aldrig små børn lege med stolen, da små dele kan tages af

1.2. FEJLFINDING

Fejl	Mulig årsag og løsning
Højdeindstilling med gaspatron virker ikke	Der er for stor belastning eller ujævn belastning på stolen. Prøv at indstille højden, uden at sidde i stolen. Hvis dette ikke virker er gaspatronen defekt og bør udskiftes. Kontakt din VELA-leverandør
Bremsefunktion virker ikke	Bremsen er ikke aktiveret. Se punkt 1.9.4.
Armlænet virker løst	Skrue er løs enten i bredde- eller højdejustering. Efterspænd skrue
Stolen ruller dårligt	Hjul er blokeret. Rens hjulene for trådrester o.l.

Løser ovenstående ikke dit problem, kontakt da din VELA-leverandør.

1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ STOLEN

<p>Advarsel</p>	<p>Klemfare: Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele</p> 
<p>Label</p>	<p>60 x 22,5 mm</p> <p>De sidste seks cifre er produktets id-nummer:</p> 

Mærker på stolen bør læses i ca. 40 cm afstand ved almindeligt dagslys. For mærker relateret til betjening henvises der til afsnit 1.9.

1.4. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder gældende EU-regler.

Stolen er produceret af:
VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. TILTÆNKET ANVENDELSE

Denne stol er beregnet til at støtte et barn i en siddende stilling, imens brugeren udfører indendørs daglige aktiviteter, herunder arbejdsaktiviteter.

- :: Stolen er ikke bygget til at stå på
- :: Stolen skal altid bremses når man sætter sig eller rejser sig.

Alle varianter af denne stol er testet og godkendt til en maksimal belastning på 60 kg. For optimal anvendelse er stolens anbefalede brugervægt 15-50 kg.

Bemærk: Personer, der bruger sele i stolen, skal altid være under opsyn, når selen er i brug.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport af stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende stolens bremse. Stolen er ikke godkendt som passagersæde i transportmidler og må derfor ikke anvendes som sådan.

Stolen kan klare følgende transportspecifikationer:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfugtighed: 15-95%

Lad stolen stå i 24 timer inden den tages i brug, såfremt den har været opbevaret koldere end - 10°C.

1.5. REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret efter gældende lovgivning i det land, hvor stolen er erhvervet. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af fagpersoner.

Bemærk: hvis der er indgået en særlig kontraktmæssig aftale direkte med VELA, gælder denne!

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- :: Transport
- :: Misbrug
- :: Almindelig slitage
- :: Forkert brug
- :: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- :: Tilpasninger foretaget af uautoriserede personer

1.6. UDPAKNING AF STOLEN

Stolen leveres i miljøvenlig og genbrugsegnet emballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte din VELA-leverandør. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Ved levering har du modtaget:

:: VELA-stol

:: Brugermanual tilhørende stolen

1.7. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af stolen for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle indstillelige dele. På www.vela.dk findes diverse vejledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

1.7.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

1.7.3. POLSTEROVERFLADER

Stof: Rengøres ved kemisk rens, med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

Kunststof/kunstlæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe.

Læder: Rengøres ved støvsugning med blød børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.

Bemærk: På www.vela.dk kan du finde rengøringsvejledninger for alle vores standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUGSHJÆLPEMIDDEL

Din VELA-stol kan genbruges, når du ikke længere har brug for den, såfremt den serviceres af en tekniker forinden.


Den forventede levetid på stolen er 5 år ved normal og korrekt brug, såfremt VELA, din VELA-leverandør eller uddannet fagpersonale udfører et årligt eftersyn med evt. udskiftning af sliddele.

1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.


1.9. BRUGERMANUAL

Udskiftning af gasfjeder må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person indenfor dette felt.

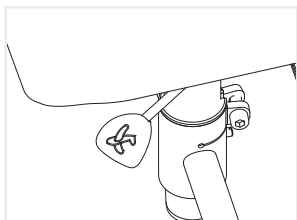


1.9.1. HØJDEINDSTILLING

Indstilles ved at trække op i grebet under sædet.
Bemærk: På VELA Hip Hop 100 er der greb i i højre og venstre side.

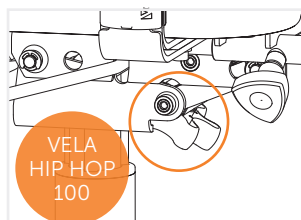


1.9.2. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL

Indstilles ved at dreje på håndgrebet under sædet.

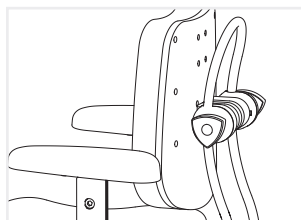


1.9.3. INDSTILLING AF RYGHØJDE OG RYGVINKEL

Begge håndgreb skal løsnes for at ændre rygvinkling og ryghøjde. Husk at spænde håndgrebene bagefter.

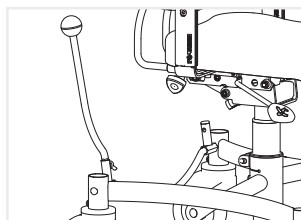


1.9.4. BREMSE

Stolen bremses ved at føre håndtaget på siden af stolen fremad. Oplås stolen ved at føre håndtaget tilbage i opret position.
Bemærk: Bremsen flyttes ved at løsne skruen nederst på bremsestangen, fjerne plastikknoppen i modsatte sides hul og isætte bremsestangen. Husk at spænde stangen fast igen.

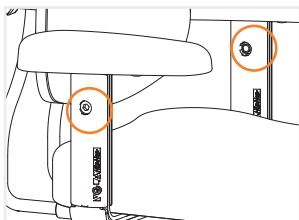


1.9.5. INDSTILLING AF ARMLÆN, HØJDE

Indstilles ved at løsne skruen på armlænsstangen (unbraco) og regulere højden på armlænet. Husk at stramme skruen igen.

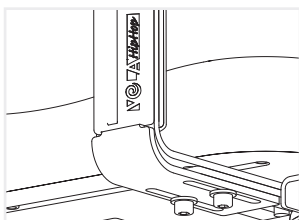

1.9.6. INDSTILLING AF ARMLÆN, BREDDE OG DYBDE

Indstilles ved at løsne skruerne under sædet (unbraco) og regulere armlænsbredde/-dybde ved at trække i armlænet. Husk at stramme skruerne igen.

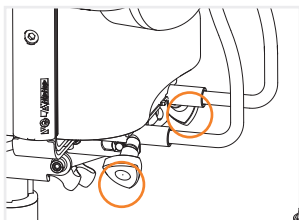

1.9.7. INDSTILLING AF SÆDEDYBDE

Indstilles ved at løsne håndskruerne under sædet og regulere dybden ved at trække i/skubbe ryglænet. Husk at stramme skruerne igen.



1.9.8. INDSTILLING AF SÆDEKILER OG SKUMBASSIN

Det er muligt, at komme ind til sædekiler og komfortzone via lynlås på bagsiden af puden. Derved er det muligt, at indsætte/ ændre støtten i sædet.

